

ストルース切断機

完璧な切断面

Labotom (ラボトム)

大小、いかなる試料にも高速に対応できる手動切断機



卓上切断機

////////////////////

LABOTOM (ラボトム) について

すぐに使用できる効率性を備えた超高速手動切断機


Labotomは、使用が簡単で強力な卓上型の超高速手動切断機です。オプションの拡張トンネルを使用すれば、非常に長い試料にも最適です。

Labotomは、コンパクトで人間工学に基づいた省スペースの設計が特徴です。信頼性が高く、すぐに使用できる効率性を備え、最小のトレーニングしか受けていない作業員でも使用でき、エラーのリスクを確実に低減します。

また、この装置は、3つの異なる角度から切断テーブルにアクセスできるように上方に移動する革新的な安全ガードでユーザーを守ります(Labotom-20のみ)。これは、作業員が切断要件に可能な限り近い位置で切断することに役立ちます。



切断能力 Labotom-5/-20

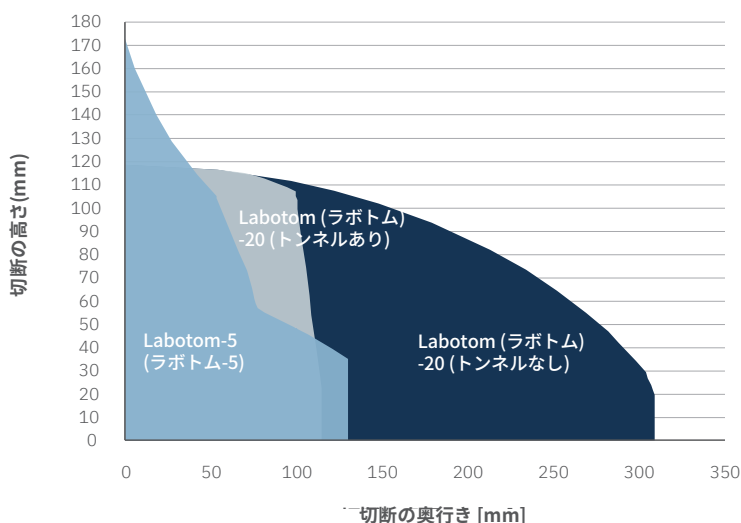

弊社はお客様の要件に応じて、さまざまな機能を搭載する豊富なモデルを提供しています。

使いやすく高い柔軟性



3つのボタンしかなく、プログラミングは必要ありません。開始、停止、フラッシングのボタンが3つあるだけです。これにより、未経験のユーザーでも Labotom を素早く簡単に操作できます。

Labotom の大型切断テーブルは、柔軟なクランピングに適した 10 mm の T 字スロット、長い試料用の拡張トンネル、焼損リスクを軽減し、手動でノズルを設置する必要のない固定冷却ノズルを備えています。

高速で簡単なクリーニング

クリーニングは、部品切断プロセスで最も時間が掛かる作業の 1 つです。洗浄時間を最小限に抑えるため、Labotom には フラッシングガンと大型排水管が内蔵されており、残屑を迅速に洗い流すことができます。また、時間の経過とともに汚れが蓄積する可能性のある角部やスペースがありません。

作業者の安全性

Labotom は、人間工学に基づいた設計と曲げ加工を施されたハンドルにより、切断作業中の作業者の負担を最小限に抑えます。これにより、過度の負荷や試料表面の損傷を防ぐことができます。

もっと見る 



- ✓ 人間工学的に適切な切断制御が可能な切断ハンドル
- ✓ メンテナンスを容易にし、稼働時間を増加する統合フラッシングガン
- ✓ 62 x 250 mm (2.5 x 9.8 インチ) 切断容量
- ✓ 250 または 350 mm (10 または 14 インチ) 直径の切断ホイール
- ✓ 10 mm (0.39 インチ) T 字スロット

'//////////

Ensuring certainty

金属組織検査用の試料と検査は、一貫した再現可能な結果を要求します。これらの結果はラボのプロセス、作業員、機器だけではなく、サプライチェーンやパートナーから生まれます。ストルアスのお客様は、高品質な装置と消耗品の設計とエンジニアリングだけではなく、弊社独自のナレッジベース、堅牢なグローバルサプライチェーン、専門家によるサービスとアプリケーションサポートを必要な場所と時間に利用できます。私たちはこれらすべてを Ensuring certainty - 確実性の確保と呼んでいます。

ストルアスは、深い科学的洞察と画期的な技術を追求することで、世界をより良い場所にすることに専念し続けています。今日、私たちは急速に変化する世界で信頼されるパートナーであり、専門知識と実務経験を世界規模で共有しています。これにより、革新的なソリューションが提供され、将来に自信を持って立ち向かうことができます。弊社は微細構造検査製品とサービスでリードし続け、より良い社会に向けた将来の開発を形作ります。

www.struers.com