


測定機から検査機へ!!




特長1) 誰でも簡単 1プッシュ判定

プロキーの測定ボタンを押す。
1プッシュだけで判定が完了。
測定の合否判定を、赤青の色彩表示。
視覚的・直感的に合否結果が理解出来ます。
手間を削減!

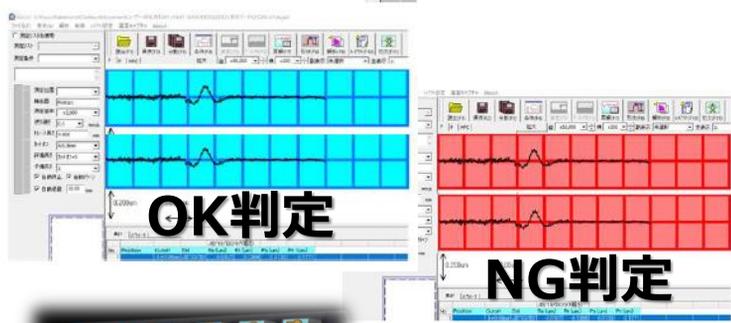

特長2) 世界初 プロキー操作

プロキーでの自由操作を実現。
各コマンドのフリーレイアウトが可能。
複数のプロキー使い分けも可能なので、
各人のオリジナルプロキーを作れます。
変更はUSBハブにプロキーを差し替えるだけ。
各人がプロキーを使い分ける事で、
ウィルス・新型コロナウイルス・衛生面での対策にもなります。

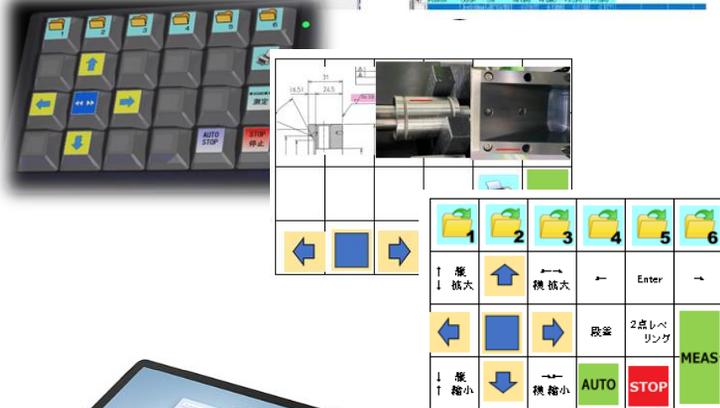

1	2	3	4	5	6
↑ 拡大	↑ 拡大	← 横拡大	←	Enter	→
←	↓ 縮小	↓ 縮小	→ 横縮小	戻る	2点レベルリング
↑ 拡大	↓ 縮小	↓ 縮小	→ 横縮小	AUTO	STOP
					MEAS

プロキーの設定例

特長3) 業界初 どこでも報告 タブレットPC

クラス最高の解析能力。
タブレットPCを持運び品証⇔現場を繋ぐリアルタイム解析を実現。



その他の特長

測定結果の自動保存

自動保存時、OK/NGの測定結果をファイル名に記載。
OKかNGか、ファイルを都度開いての確認は不要。
結果の改ざんも防止!

20240215_183750_OK



20240215_183810_NG

保存ファイル名の一例

プロファイラー ver.

SE500proが膜厚/段差計に変身。
反り、ワープ、うねりも測定可能。

プロキータからの解析指示も可能
(開発中)。
半導体、ディスプレイ、LED、
材料業界に最適!

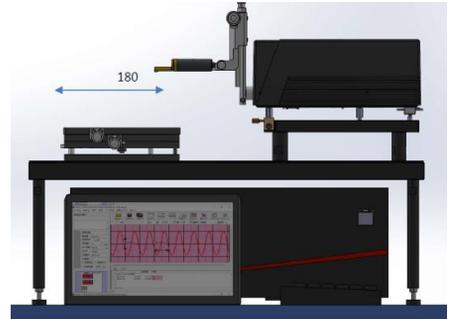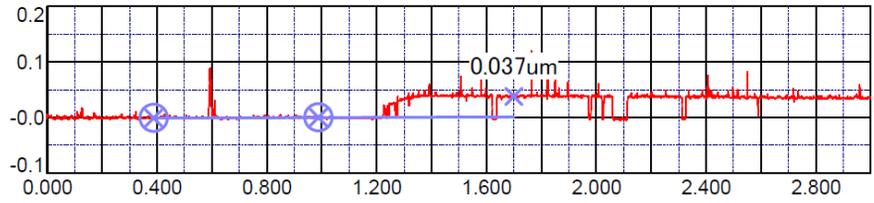

SE500proとCheck Port

測定室をフリーレイアウト化

Check Portで縦の空間を有効活用。
限られた作業スペースに他の作業空間を創出します。
省スペース化を実現!

主な仕様	SE500pro	自動上下台付属型 SE500pro-58D	測定長100mm型 SE500pro-18D
真直度	0.3μm/55mm	←	0.2μm/100mm
X軸のストローク	55mm	←	100mm
測定速度	0.05 - 2.00mm/秒	←	←
移動速度	0.05 - 9.00mm/秒	←	0.50 - 10.00mm/秒
高さ調節範囲	70mm	←	-----
Z軸のストローク	-----	250mm	←

URL <http://www.kosakalab.co.jp> E-mail: tokyom@kosakalab.co.jp

本社 / 東京営業所
Headquarters /
Tokyo Business Office 〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-13-10
6-13-10 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021
TEL (03) 5812-2011(代) FAX (03) 5812-2015

三郷営業所
Misato Business Office 〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野 3-63
3-63 Takano Misato-shi, Saitama-ken 341-0035
TEL (048) 955-1214(代) FAX (048) 955-1218

大阪営業所
Osaka Business Office 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-11-21 新大阪コーパビル 1F
Shin-Osaka Copper Bldg., 4-11-21 Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka-shi 532-0011
TEL (06) 6885-0765(代) FAX (06) 6885-1976

名古屋営業所
Nagoya Business Office 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社 3-609 北村第1ビル
Kitamura Dai-ichi Bldg., 3-609 Kamiyashiro Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 465-0025
TEL (052) 705-1801(代) FAX (052) 705-1804

釜山駐在員事務所
Busan Representative Office 〒48059 韓国 釜山広域市海雲台区セントム東路 71, 603 号(佑洞)
Room 603, 71, Centum Dong-ro, Haeundae-gu, Busan, South Korea
TEL (+82) 51-731-6898 FAX (+82) 51-731-2978



SE500pro-58D

デスクトップPCや
ノートPCも使用可能



SE500pro-18D

