

0.2 μm ~ 2.0 μm の広範囲な可測粒径範囲。
高計数効率による、少ないサンプル量で測定が可能。



液中パーティクルセンサ KS-42B/42BF [フッ化水素酸対応]


- 最小可測粒径0.2 μm 、定格流量10 mL/min
- 粒径区分
0.2 μm ~2.0 μm の範囲で最大10段階
(KE-40B1の機能による)
出荷時: 5段階
(0.2 μm 、0.3 μm 、0.5 μm 、1.0 μm 、2.0 μm 以上)
- 液漏れセンサ内蔵。本体内で液漏れ発生時に警報を出力
- KS-42BFはサファイアセルを使用



仕様 [KS-42B/42BF]

光学方式	側方散乱方式
光源	半導体レーザー(波長:780 nm、定格出力:40 mW)
レーザー製品のクラス	クラス1、IEC 60825-1
受光素子	PINタイプ フォトダイオード
接液部材質	KS-42B:合成石英、PFA、PTFE KS-42BF:サファイア、PFA、PTFE
導入可能な液体	接液部を腐食しない液体
校正	純水中のポリスチレンラテックス(PSL)粒子(屈折率1.6)
粒径区分	
5段階(出荷時)	0.2 μm以上、0.3 μm以上、0.5 μm以上、1.0 μm以上、2.0 μm以上
任意設定	1段階から10段階で任意設定、設定はコントローラから行う。
設定範囲	0.2 μm~2.0 μm
計数効率	KS-42B、KS-42BF:70 %~110 %
定格流量	10 mL/min
最大粒子個数濃度	1 200個/mL (0.2 μmの粒子において、計数損失5 %以内)
試料温度範囲	15 °C~35 °C(セル部に結露を生じないこと)
試料圧力範囲	300 kPa(ゲージ圧)以下
試料導入口/排出口	φ2 ×φ4 フレア加工チューブ用継手
バージョ	Rc1/8(1/8 PT めねじ)
入出力端子	
CONTROLLER端子	KE-40B1と接続
LIQUID LEAK	動作正常時は短絡、本器内部で液漏れを検知すると開放になる
ALARM端子	警報出力端子
電源	DC12V(KE-40B1より供給)
使用温湿度範囲	15 °C~35 °C、80 %RH 以下(結露のないこと)
大きさ・重さ	125(H)×240(W)×151(D)mm(突起物を除く)・約3.2 kg
付属品	チューブA 真空パック×1 (φ2×φ4 PFA チューブ片側フレア加工 1.5 m 2本、ユニオン継手1個)、接続ケーブル(1 m)×1
オプション	接続ケーブル(5 m) KS-42-123

測定システム例

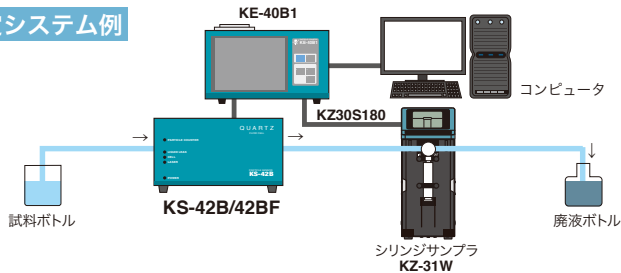

パーティクルセンサの動作制御、測定データの表示用。
コントローラ KE-40B1

- 粒径区分を最大 10 チャンネルまで任意に設定可能
- プリント内蔵、メモ리카ード(CF カード)による測定データの保存が可能




RPモニタ Evo10 K1701 Ver.2

オプション

パーティクルカウンタの測定開始、停止／光源・内蔵ポンプのON、OFFを制御。
測定時刻、周期、回数、アラーム、換算などを設定。

- シリアルモードのパーティクルカウンタを最大8ポート(8台)まで制御可能

対応OS : Microsoft Windows 10 Pro 64 bit

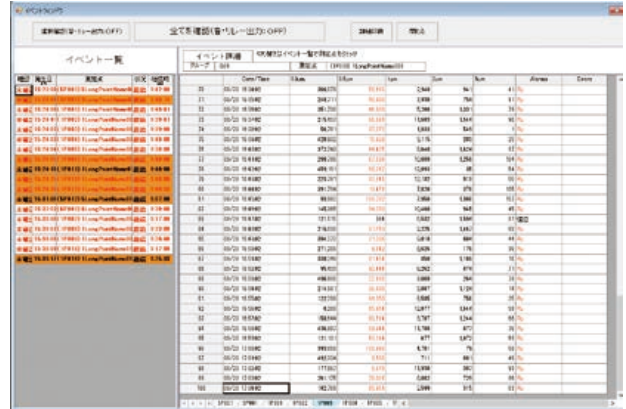

イベントウィンドウ

シリンジサンプラ
KZ-31W

液中パーティクルセンサのバッチ測定用。

※接続ケーブル(KZ30S180、オプション)



仕様 [KE-40B1]

表示部	
表示項目	粒径区分:最大10段階表示、計数値・最大表示桁数8桁
操作部	タッチパネル、シートスイッチ
測定	
測定時間	10秒~2時間、および手動
測定モード	手動測定 自動測定:平均値測定、移動平均測定、周期測定、定時刻測定
警報	選択されたチャンネルの計数値が設定された警報レベルとなったときに ブザーを鳴らし、ALARM端子間をリレー接点により短絡 接続最大負荷 DC 30 V、1 A
通信方式	RS-232C
プリンタ部	測定結果の印字、日付・時刻
記録紙	感熱記録紙: TP-08、無塵感熱記録紙: TP-10
メモリ	コンパクトフラッシュカード※(TSV形式で自動保存)
電源	AC100 V~240 V、50/60 Hz、130 VA
大きさ・重さ	140(H)×240(W)×146(D)mm(突起物を除く)・約3 kg
付属品	電源コード×1、感熱記録紙 TP-08×2巻、ダミーカード
オプション	通信ケーブル CC-61A/63A、感熱記録紙 TP-08、無塵感熱記録紙 TP-10、 メモ리카ード MC-25CF2(256 MB)、CFカードアダプタ CFC-ADP03
工場オプション	D/Aコンバータ・インタフェース KE-40-S06

※動作を保証する当社販売品をお使いください

リオン株式会社

<https://www.rion.co.jp/>

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

本社 微粒子計測器営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7458

九州リオン(株)

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL(092)281-5366 FAX(092)291-2847

修理に関するお問い合わせ

リオンサービスセンター(株)

〒192-0918 東京都八王子市兵衛2丁目22番2号
TEL(042)632-1160 FAX(042)632-1140

ISO14001 本社・東海営業所・
西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所・
西日本営業所・九州リオン・
リオンサービスセンター 認証取得

